


## SCHEDA TECNICA

### NEGATIVOSCOPI DA PARETE SERIE STANDARD

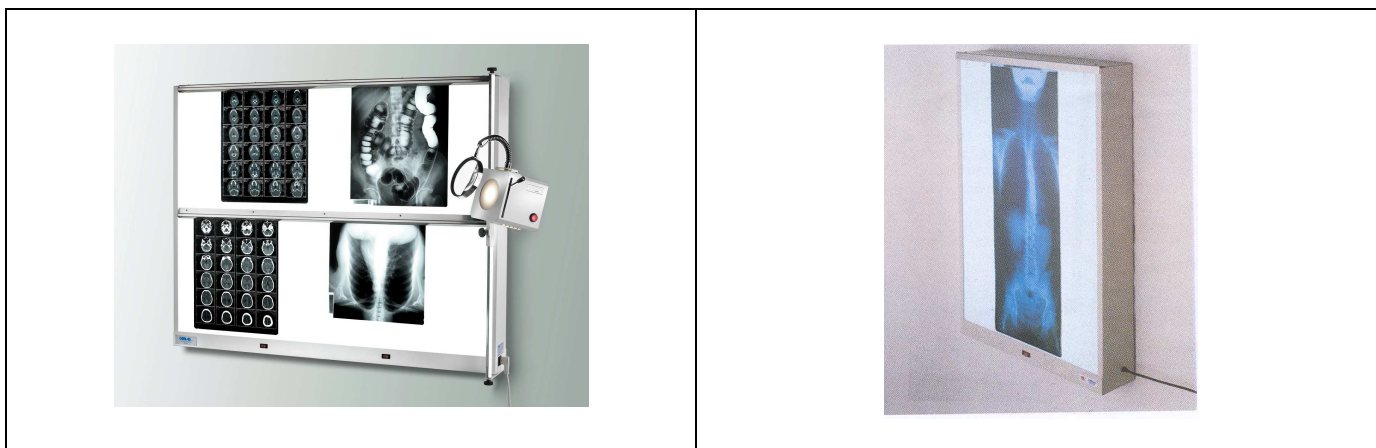

- Struttura in lamiera acciaio spessore 0,8 mm;
- Verniciatura epossidica a fuoco tinta RAL 9010 ;
- Schermo in acrilico colato opalino spessore 3 mm. inserito a coulisse nella struttura;
- Lampade al neon da 6.000Kelvin (su richiesta è possibile fornire lampade di altro tipo);
- Reggipellicole superiore e/o centrale a rullini pressanti;
- Interruttore a bascula bipolare frontale (su richiesta è possibile applicare interruttori d'altro tipo e/o posizione);
- Fusibili esterni tipo ritardato 5x20 (posizioni in basso sul lato destro);
- Cavo alimentazione completo di spina più terra tipo "italiano" lungo cm. 180 (su richiesta è possibile fornire altri tipi di cavi) ;
- Predisposti per installazione a parete mediante tasselli ad espansione;
- Integrabili con altri dispositivi opzionali quali : supporto laterale per visori spot e/o lente di ingrandimento, carrelli su ruote, variatori di intensità luminosa;
- Il negatoscopio è conforme alla Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici - Classe 1 inoltre è conforme alla Direttiva 73/23 CEE (Bassa tensione) 89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica).  
La costruzione è conforme alle norme EN 60601 -1,2 / Din 6856 -1,2
- Alimentazione 230V / 50Hz + terra
- Manutenzioni : pulizia periodica (ogni 6 mesi circa) dello schermo interno

## CARATTERISTICHE – SERIE STANDARD

### SERIE ORIZZONTALE ALTEZZA 43:

CODICE	FORMATO	MISURE ESTERNE CM.	PESO KG.	NUMERO LAMPADIE	SEZIONI LUCE	W	A	FUSIBILI	CD/MQ
<b>M-NP-30</b>	35 X 43	37 X 52 X 11	6	2 – 15W	1 – 35 X 43	50	0,3	1	2200
<b>M-NP-41</b>	40 X 43	45 X 52 X 11	6,2	2 – 15 W	1 – 40 X 43	50	0,3	1	2200
<b>M-NP-70</b>	70 X 43	78 X 52 X 11	10	4 – 15 W	1 – 70 X 43	90	0,4	1	2700
<b>M-NP-90</b>	90 X 43	95 X 52 X 11	12	2 – 30 W	1 – 90 X 43	80	0,4	1	2700
<b>M-NP-120</b>	120 X 43	126 X 52 X 11	15	2 – 36 W	1 – 120 X 43	90	0,4	1	2800
<b>M-NP-150</b>	150 X 43	156 X 52 X 11	18	2 – 58 W	1 – 150 X 43	130	0,6	2	3000
<b>M-NP-180</b>	180 X 43	187 X 52 X 11	21	4 – 30 W	2 – 90 X 43	150	0,7	2	2700

### A DUE SEZIONI ORIZZONTALI:

<b>M-NP-121</b>	90 X 86	96 X 99 X 11	21	4 – 30 W	2 – 90 X 43	150	0,7	2	2700
<b>M-NP-122</b>	120 X 86	126 X 99 X 11	28,5	4 – 36 W	2 – 120 X 43	180	0,9	2	2800
<b>M-NP-152</b>	150 X 86	156 X 99 X 11	36	4 – 58 W	2 – 150 X 43	270	1,3	2	3000
<b>M-NP-182</b>	180 X 86	187 X 99 X 11	42	8 – 30 W	4 – 90 X 43	270	1,3	2	2700

### A SEZIONE VERTICALE:

<b>M-NV-010</b>	30 X 90	35 X 98 X 11	11,5	2 – 30 W	1 – 30 X 90	80	0,4	1	3500
<b>M-NV-020</b>	60 X 90	65 X 98 X 11	13,5	3 – 30 W	1 – 60 X 90	120	0,6	2	3800
<b>M-NV-030</b>	60 X 120	65 X 128 X 11	16,5	3 – 36 W	1 – 60 X 120	140	0,7	2	3800