

CATALOGO
2020

CABLAS

MADE IN ITALY



CABLAS

Schermature Anti-X

Accessori per Radiologia e Risonanza Magnetica



Via G. Brodolini, 4
20863 Concorezzo - Monza e Brianza



039-6049521



www.cablas.com



cablas@cablas.com



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9108636730

INDICE ARTICOLI

Accessori amagnetici	da 67 a 79	Occhiali e maschere antix	55 / 56
Accessori per grembiuli	47	Pannelli murali antix	85
Ante scorrevoli / battente antix	90 / 91	Pareti mobili antix	61
Armadi amagnetici	80 / 81	Passalastre	20
Aspiratore per camera oscura	22	Pellicole radiografiche	12
Astine reggimorso	31	Pinzette reggipellicole	11
Automatismo per porte scorrevoli	89	Portarifiuti schermato	32
Bacinelle	8	Porte antix	87 / 88
Bustine coprimorso	31	Protezioni antix gonadi	da 52 a 54
Cabinati antix	86	Protezione antix mobile	66
Cassetta portasinghe	32	Protezioni antix seno	49
Cassette radiografiche	13	Reggigrembiuli murali e mobili	47 / 48
Cassone piombato	17	Reticoli	16
Cassonetto reggicristallo	84	Sacchetti di sabbia	30
Chimici automatici	4	Sagome radiotrasparenti	29
Chimici manuali	9	Schermatura per siringhe	32
Collari antix	50 / 51	Schermatura antix pavimenti	91 / 92
Contenitori griglia-.cassetta	16	Schermi di rinforzo	14 / 15
Cristalli antix	82 / 83	Schermi mobili antix	62
Day film	9	Schermi mobili antix con visiva	63
Essiccatore ad armadio	11	Schermi mobili antix per rad. vascolare	60
Fototimbro	21	Segnalatori rx/laser luminosi	84
Grembiule antix per tavolo operatorio	65	Stativo pensile	64
Grembiuli antix	da 33 a 44	Sviluppatrice automatica	4
Grembiuli antix per bambini	45 / 46	Tagliangoli / taglierina	17
Grembiuli antix per prot. bacino	49	Tavoli di caricamento	19
Guanti antix	57	Telai reggipellicola	10
Lampade inattiniche e da soffitto	21 / 22	Teli antix	59
Lettere in piombo e a clip	18	Tende antix	90
Mensole reggitelai	11	Termometro per camera oscura	4
Morsetti per ortopantomografo	31	Timer per camera oscura	4
Negativoscopi	da 23 a 27	Vasche per radiologia industriale	7
Negativoscopi per radiologia industriale	28	Vasche di sviluppo manuale	5 / 6
Numeri in piombo	18	Vaschette per odontoiatria	8

SVILUPPATRICE AUTOMATICA

Idonea per radiologia convenzionale e in particolare per usomammografico.

Velocita' di trattamento da 90 a 180 secondi.

Capacità di sviluppo fino a 95 pellicole/h nel formato cm 35 x 43.

Capacità bacinella di sviluppo lt 2,6 – fissaggio lt 2,5 – lavaggio lt 3.



CODICE	FORMATO CM	PESO KG.
A-SA-900	639 X 919 X 520	Vuota Kg 58 Con chimici Kg 66
A-SA-900/S	Sostegno per sviluppatrice automatica	

CHIMICI SVILUPPO/FISSAGGIO AUTOMATICI

CODICE	DESCRIZIONE
A-SV-20	Sviluppo radiografico automatico 2 x 20 Confezione 2 flaconi da Lt 5 concentrato idonei ciascuno per 20 Lt di soluzione
A-FI-15	Fissaggio radiografico automatico 2 x 20 Confezione 2 flaconi da Lt 5 concentrato idonei ciascuno per 20 Lt di soluzione

ACCESSORI PER CAMERA OSCURA

CODICE	DESCRIZIONE
F-OR-01	Timer 60'
F-PZ-10	Pinzette reggi pellicole; Confezione da 10 pz
P-TR-01	Termometro galleggiante 0-40°

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE TERMOREGOLATE

Costuite in PVC antiacido, complete di bacinelle con coperchio estraibile per sviluppo e fissaggio.

Scomparti fissi per lavaggio intermedio e finale. Rubinetteria antiacido.

Il riscaldamento della zona sviluppo avviene mediante utilizzo di resistenze corazzate e termoregolate; la termoregolazione è controllata mediante quadro di controllo elettronico corredato di segnalatore di sicurezza termica e interruttore generale con fusibili.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
A-VS-01	<p>VASCA ALFA 2 COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bacinella sviluppo da lt10; - 1 bacinella fissaggio da lt10; - 1 bacinella lavaggio intermedio e finale lt80 <p>Dim. cm 60 X 53 X 98 – KG 31</p>	
A-VS-03	<p>VASCA DELTA 1 COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bacinella sviluppo da lt20; - 1 bacinella fissaggio da lt20; - 1 bacinella lavaggio intermedio lt16 - 1 bacinella lavaggio finale lt 100 <p>Dim. cm 105 X 60 X 105 – KG62</p>	

VASCHEE DI SVILUPPO MANUALE

Costuite in PVC antiacido, complete di coperchio estraibile per sviluppo, fissaggio. Rubinetteria antiacido.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
A-VS-15	<p>KIT DI SVILUPPO ADATTO PER TELAI MAX CM 35X43 COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bacinelle da lt 20 con rubinetti di scarico; - 1 bacinella da lt 30 con rubinetto di scarico; - 1 vasca per contenimento bacinelle scaricoliquidi - 5 mt di tubo in gomma flessibile <p>Dim. cm 50 X 60 X 62 – KG22</p>	
A-VS-20	<p>VASCETTA ALFA 4:</p> <p>Adatta per sviluppo manuale di pellicole Rx fino al formato cm 35 x 43, completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 scomparti fissi da 5 lt per sviluppo e fissaggio; - 1 scomparto fisso da 28 lt per lavaggio intermedio e finale; - Carico automatico e troppo pieno <p>Dim. cm 27 X 48 X 96 – KG12</p>	
A-VS-21	<p>VASCETTA ALFA 4 - TERMOREGOLATA:</p> <p>Adatta per sviluppo manuale di pellicole Rx fino al formato cm 35 x 43, completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 scomparti fissi da 5 lt per sviluppo e fissaggio; - 1 scomparto fisso da 28 lt per lavaggio intermedio e finale; - Carico automatico e troppo pieno <p>- W150 – V220 – Hz 50 Dim. cm 27 X 48 X 96 – KG 12,5</p>	
A-VS-22	<p>VASCETTA TIPO A:</p> <p>Adatta per sviluppo manuale di pellicole Rx fino al formato cm 30 x 40, completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 scomparti fissi da 2,5 lt per sviluppo e fissaggio; - 1 scomparto fisso da 15 lt per lavaggio intermedio e finale; <p>Dim. cm 22 X 38 X 53 – KG11</p>	
A-VS-24	<p>VASCETTA TIPO A - TERMOREGOLATA:</p> <p>Adatta per sviluppo manuale di pellicole Rx fino al formato cm 30 x 40, completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 scomparti fissi da 2,5 lt per sviluppo e fissaggio; - 1 scomparto fisso da 15 lt per lavaggio intermedio e finale; <p>- W150 – V220 – Hz 50 Dim. cm 22 X 38 X 53 – KG 11,5</p>	

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE MODELLO INDUSTRIA

Costuite in PVC antiacido, complete di bacinelle con coperchio estraibile per sviluppo e fissaggio.

Scomparti fissi per lavaggio intermedio e finale. Rubinetteria antiacido.

Il riscaldamento della zona sviluppo avviene mediante utilizzo di resistenze corazzate e termoregolate; la termoregolazione è controllata mediante quadro di controllo elettronico corredato di segnalatore di sicurezza termica e interruttore generale con fusibili.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
<p>A-VS-02</p>	<p>VASCA ALFA 2 INDUSTRIA COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bacinella sviluppo da lt10; - 1 bacinella fissaggio da lt10; - 1 bacinella lavaggio intermedio e finale lt80 <p>Dim. cm 60 X 53 X 98 – KG 31 Completa di bacinelle per pellicole ad uso industriale.</p>	
<p>A-VS-07</p>	<p>VASCA DELTA 1 INDUSTRIA COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bacinella sviluppo da lt20; - 1 bacinella fissaggio da lt20; - 1 bacinella lavaggio intermedio lt16 - 1 bacinella lavaggio finale lt 100 <p>Dim. cm 105 X 60 X 105 – KG62 Completa di bacinelle per pellicole ad uso industriale.</p>	

VASCHE PVC DENTAL

Per sviluppo manuale di pellicole Rx panoramiche.

Modello a 3 scomparti completi di rubinetti di scarico in pvc.

Capacità di sviluppo lt 4. Fissaggio lt 4.

Lavaggio intermedio e finale lt 9.




CODICE	DESCRIZIONE
W-VD-01	VASCA DENTAL Dim. cm 24 x 40 x 41 h
W-VD-02	VASCA DENTAL TERMOREGOLATA Completa di resistenza W100 – V220 – Hz50 Dim. cm 24 x 40 x 41 h

BACINELLE VERTICALI

Costruite in PVC antiacido;

Complete di coperchio

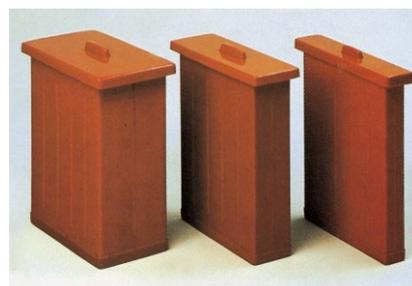

CODICE	DESCRIZIONE
A-VS-04	Capacità 10 lt – Dim. cm 6 x 42 x 58 h
A-VS-05	Capacità 20 lt – Dim. cm 11 x 42 x 58 h
A-VS-06	Capacità 40 lt – Dim. cm 19 x 42 x 58 h

DAY FILM



Contenitore inattinico per il trattamento manuale a luce giorno delle pellicole Rxendorali fino al formato cm 5x7, costruito in materiale antiacido.

Completo di:
3 bacinelle con coperchio per sviluppo-fissaggio-lavaggio - capacità 200 cc cad.
1 supporto con pinzetta.

CODICE	DESCRIZIONE
W-DF-01	Day film - Dim. cm 23x33x31 h

CHIMICI DI SVILUPPO E FISSAGGIO MANUALI

CODICE	DESCRIZIONE
A-SV-02	<p>SVILUPPO RADIOGRAFICO MANUALE Concentrato da 1 Lt che consente di ottenere 6 Lt di prodotto diluito CONFEZIONE DA 12 FLACONI</p>
A-FI-02	<p>FISSAGGIO RADIOGRAFICO MANUALE Concentrato da 1 Lt che consente di ottenere 5 Lt di prodotto diluito CONFEZIONE DA 12 FLACONI</p>




TELAJ REGGIPELLICOLE A CANALE SINGOLO

CODICE	DIMENSIONE	
F-TC-01	CM 13 X 18	
F-TC-02	CM 18 X 24	
F-TC-03	CM 24 X 30	
F-TC-05	CM 30 X 40	
F-TC-06	CM 35 X 35	
F-TC-07	CM 35 X 43	
F-TC-08	CM 15 X 40	
F-TC-09	CM 20 X 40	
F-TC-24 PER VASCA DENTAL	CM 24 X 10 / 15 / 18	
F-TC-30 PER VASCA DENTAL	CM 30 X 10 / 15 / 18	
FMR0003	CM 10 X 48	*** Ordine minimo 50 pz ***

TELAJ REGGIPELLICOLE A CANALE TRIPLO

***Acquisto minimo 50 pz ***

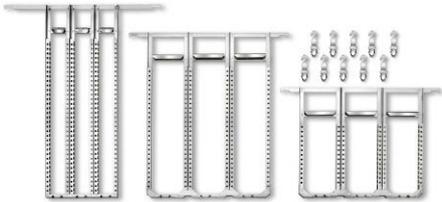CODICE	DIMENSIONE	
FMR0002	CM 10 X 48	
FMR001	CM 6 X 48	
FMR010	CM 6 X 24	
FMR011	CM 10 X 24	
FMR015	CM 10 X 40	

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE
F-RT-01	Mensola reggi telai 20 posti
F-PZ-10	Pinzette reggi pellicole in acciaio inox Conf. 10pz

ESSICCATORE AD ARMADIO

Consente l'asciugatura simultanea di pellicole radiografiche ed industriali sviluppate manualmente, disposte in appositi telai fino a 15 unità per volta.

Costruzione in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

Completo di:

- termostato per la regolazione della temperatura;
- temporizzatore per l'interruzione automatica di esercizio e di supporti interni in acciaio inox adatti a sorreggere 15 telai reggipellicola.

Ventilazione forzata dall'alto verso il basso.

Capacità di trattamento: n. 30 pellicoleora



CODICE	DIMENSIONI
E-EA-03	CM 59 X 50 X 120H

PELLICOLE RADIOGRAFICHE

*** ACQUISTO MINIMO 5 CONF. ***

Doppia emulsione, eccellente definizione con alti contrasti e basso livello di annebbiamento.

Presente strato di protezione elettrostatica.

Scatola da pz 100 – senza separatori interni – Sp. mm 0,18



CODICE	SENSIBILI LUCE	DIMENSIONE
FILM18	VERDE	CM 18 X 24
FILM18/BLU	BLU	CM 18 X 24
FILM1843	VERDE	CM 18 X 43
FILM1843/BLU	BLU	CM 18 X 43
FILM20	VERDE	CM 20 X 40
FILM20/BLU	BLU	CM 20 X 40
FILM24	VERDE	CM 24 X 30
FILM24/BLU	BLU	CM 24 X 30
FILM30	VERDE	CM 30 X 40
FILM30/BLU	BLU	CM 30 X 40
FILM35	VERDE	CM 35 X 35
FILM35/BLU	BLU	CM 35 X 35
FILM40	VERDE	CM 15 X 40
FILM40/BLU	BLU	CM 15 X 40
FILM43	VERDE	CM 35 X 43
FILM43/BLU	BLU	CM 35 X 43
FILM12	VERDE	CM 12,7 X 30,5
FILM12/BLU	BLU	CM 12,7 X 30,5
FILM13	VERDE	CM 13 X 18
FILM13/BLU	BLU	CM 13 X 18
FILM15	VERDE	CM 15 X 30
FILM15/BLU	BLU	CM 15 X 30

CASSETTE RADIOGRAFICHE

Prodotte in lega di alluminio e materiali speciali, angoli in plastica ed alluminio; il materiale di rivestimento interno è realizzato con un tessuto sintetico morbido che permette allo schermo di rinforzo di aderire perfettamente alla pellicola radiografica assicurando che l'immagine sulla pellicola sia chiara e ricca.

C'è un dispositivo di bloccaggio sul coperchio della cassetta, che può essere attivato con una semplice pressione.



CODICE	MISURE ESTERNE CM
G-SP-50	13 X 18
G-SP-51	18 X 24
G-SP-52	24 X 30
G-SP-54	30 X 40
G-SP-55	35 X 35
G-SP-56	35 X 43
G-SP-57	15 X 30
G-SP-58	15 X 40
G-SP-59	20 X 40
G-SP-61	30 X 90
G-SP-62	30 X 120
G-SP-69	18 X 43
G-SP-70	30 X 60

CASSETTE RADIOGRAFICHE PER MAMMOGRAFIA CON FINESTRA

Complete di schermi di rinforzo mono-emulsione

CODICE	MISURE ESTERNE
G-MM-03	CM 18 X 24
G-MM-04	CM 24 X 30

PELLICOLE MAMMOGRAFICHE

CODICE	SENSIBILI LUCE	DIMENSIONE
FILM18/MAM	VERDE	CM 18 X 24
FILM18/MAM/BLU	BLU	CM 18 X 24
FILM24/MAM	VERDE	CM 24 X 30
FILM24/MAM/BLU	BLU	CM 24 X 30

SCHEMI DI RINFORZO

TERRE RARE VERDE – VELOCITA'400

Compatibili con tutte le pellicole convenzionali e destinati a migliorare la qualità dell'immagine RX globale.

La nostra gamma di schermi si adatta a qualunque tipo di cassetta radiografica.

Ogni schermo fornisce alti contrasti, percezione dei dettagli, anche con riduzione dei dosaggiRX.

Prima di utilizzare la cassetta radiografica occorre applicare gli schermi di rinforzo internamente alla cassetta.



CODICE	FORMATO CM
H-AT-20	13 X 18
H-AT-21	18 X 24
H-AT-22	24 X 30
H-AT-23	18 X 43
H-AT-24	30 X 40
H-AT-25	35 X 35
H-AT-26	35 X 43
H-AT-27	15 X 30
H-AT-28	15 X 40
H-AT-29	20 X 40

SCHERMI DI RINFORZO

TERRE RARE BLU – VELOCITA' 400

Compatibili con tutte le pellicole convenzionali e destinati a migliorare la qualità dell'immagine RX globale. La nostra gamma di schermi si adatta a qualunque tipo di cassetta radiografica.

Ogni schermo fornisce alti contrasti, percezione dei dettagli, anche con riduzione dei dosaggi RX.

Prima di utilizzare la cassetta radiografica occorre applicare gli schermi di rinforzo internamente allacassetta.



CODICE	FORMATO CM
H-AS-01	13 X 18
H-AS-02	18 X 24
H-AS-03	24 X 30
H-AS-04	18 X 43
H-AS-05	30 X 40
H-AS-06	35 X 35
H-AS-07	35 X 43
H-AS-08	15 X 30
H-AS-09	15 X 40
H-AS-10	20 X 40

CONTENITORI GRIGLIA/CASSETTE

Dispositivo che consente di utilizzare un'unica griglia esterna fissa con cassette dello stesso formato intercambiabili.



CODICE	DIMENSIONI
C-GC-01	CM 18 X 24
C-GC-02	CM 24 X 30
C-GC-03	CM 30 X 40
C-GC-04	CM 35 X 35
C-GC-06	CM 35 X 43

RETICOLO QUADRETTATO CON SUPPORTO TRASPARENTE

Reticoli quadrettati mm 50 x 50 con supporto in celluloidi trasparente da inserire tra gli schermi di rinforzo.

CODICE	DESCRIZIONE
RT-OR-52	Reticolo trasparente dim. cm 30 x 90
RT-OR-53	Reticolo trasparente dim. cm 30 x 120

CASSONE PIOMBATO

Contenitore adatto per il trasporto e la protezione di cassette radiografiche e pellicole rx vergini;

Coperchio superiore con dispositivo di blocco, scorrevole su ruote piroettanti, rialzato da terra;

Schermatura Pb mm 2




CODICE	DESCRIZIONE
P-CP-01	Capacità 20 cassette – Dim. cm 55 x 60 x 78 h

TAGLIERINA E TAGLIANGOLI

CODICE	DESCRIZIONE	
L-TR-00	Taglierina dim. luce taglio cm 46 X 15	
L-TR-01	Taglierina dim. luce taglio cm 51 X 30	
L-TR-02	Taglia angoli adatto per il taglio di qualsiasi grandezza d'angolo	

NUMERI E LETTERE IN PIOMBO

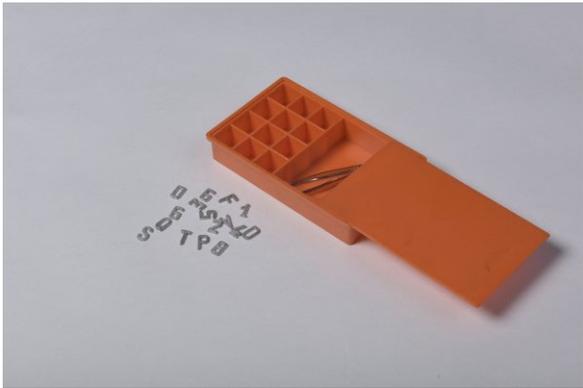CODICE	DESCRIZIONE	
L-PB-01	<p>SCATOLA NUMERI IN PIOMBO MM 12H COMPLETA DI:</p> <p>5 serie di numeri 0-9 2 lettere A-P / S-D 1 pinzetta</p>	
L-PB-02	<p>SCATOLA LETTERE IN PIOMBO MM 12H COMPLETA DI:</p> <p>2 serie di lettere A-Z (26 lettere cad.) 1 pinzetta</p>	
L-PB-03	<p>LETTERE IN PIOMBO MM 12H</p> <p>Confezione di 5 serie A-Z (26 pz cad.) *** senza scatola ***</p>	
L-PB-04	<p>NUMERI IN PIOMBO MM 12H</p> <p>Confezione di 10 serie 0-9 (10 pz cad.) *** senza scatola ***</p>	
L-PB-05	<p>LETTERE IN PIOMBO MM 20 H</p> <p>Confezione di 20 pz (10 D + 10S)</p>	
L-PB-20	<p>LETTERE A CLIP R/L</p> <p>In acciaio inox</p> <p>Adatte per l'aggancio sulla cassetta.</p> <p>Confezione da 5 pz</p>	

TAVOLI DI CARICAMENTO



Tavoli di caricamento per la camera oscura, indispensabili per la conservazione di pellicole RX vergini.

Struttura in acciaio verniciata a fuoco; piano in legno rivestito in gomma nera antistatica.

Sportelli a bilico con chiusura forzata a tenuta luce.

CODICE	DIMENSIONI	SPORTELLI	CASSETTI	STOCCAGGIO PELLICOLE
D-TC-00	CM 54 X 62 X 100	1	1	4 CONF. DA 100 PELL.
D-TC-01	CM 97 X 62 X 100	2	1	77 CONF. DA 100 PELL.
D-TC-02	CM 147 X 62 X 100	3	1	10 CONF. DA 100 PELL.

PASSALASTRE



Passalastre adatto per il passaggio delle cassette radiografiche dalla sala radiologica agli operatori della camera oscura proteggendoli dai rischi di esposizione ai raggi x. Struttura metallica verniciata a fuoco.

Piani interni rivestiti in gomma. Antine schermate.

Chiusura alternata e obbligata mediante dispositivo di sicurezza. Protezione frontale antix Pb mm 2.

CODICE	ANTE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI FORO PARETE
D-PS-01	2	CM 35 X 58 X 54H	CM 28,5 X 54,5
D-PS-02	4	CM 66 X 58 X 54H	CM 58,5 X 54,5

FOTOTIMBRO PER CAMERA OSCURA

Adatto per imprimere i dati identificativi del paziente sulle radiografie.

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

Spazio di identificazione mm 85 x 25

Completo di temporizzatore elettronico.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
L-FT-03	Fototimbro per camera oscura	CM 24 X 23 X 6H
L-FT-04	Cartoncini per fototimbro. 1000 pz	

LAMPADE INATTINICHE DA PARETE PER CAMERA OSCURA

Struttura in ABS antiacido completa di supporto orientabile.

Completa di lampadina e filtro di sicurezza.

Predisposta per filtri intercambiabili cm 16 x 21



CODICE	DESCRIZIONE
M-LI-01	Lampada inattinica con filtro idoneo film sensibili luce blu
M-LI-02	Lampada inattinica con filtro idoneo film sensibili luce verde

LAMPADE DA SOFFITTO AL SODIO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;

Schermo inattinico di sicurezza cm 25 x 35 per film sensibili alla luce blu.

Lampadina a vapore di sodio NA 35 W.



CODICE	DIMENSIONI
M-NA-01	Dimensioni cm 38 x 29 x 35 h – Peso Kg 8

LAMPADE DA SOFFITTO

CODICE	DESCRIZIONE
M-LS-01	Lampada da soffitto con filtro idoneo film sensibili luce blu
M-LS-02	Lampada da soffitto con filtro idoneo film sensibili luce verde

ASPIRATORE PER CAMERA OSCURA

Completo di n. 1 cappa antiluce e comando a distanza regolabile con invertitore di flusso.



CODICE	DIMENSIONI
V-AS-03	Foro d'installazione diam. 260 mm

NEGATIVOSCOPI DA PARETE SERIE STANDARD

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

Illuminazione omogenea a luce fluorescente con temperatura 6000°K.

Accensione rapida. Interruttori bipolari.

Dispositivo reggipellicola a rullini pressanti.
Diffusore monocromatico bianco.

Normativa di riferimento: CEI EN 61010-1.

Prove di sicurezza apparecchiature elettriche di utilizzo in laboratorio.



SERIE ORIZZONTALE ALTEZZA CM 43:

CODICE	FORMATO	MISURE ESTERNE CM.	NUMERO LAMPADIE	SEZIONI LUCE
M-NP-41	40 X 43	45 X 52 X 11	3 – 15 W	1 – 40 X 43
M-NP-70	70 X 43	78 X 52 X 11	3 – 18 W	1 – 70 X 43
M-NP-90	90 X 43	95 X 52 X 11	3 – 30 W	1 – 90 X 43
M-NP-120	120 X 43	126 X 52 X 11	3 – 36 W	1 – 120 X 43
M-NP-150	150 X 43	156 X 52 X 11	3 – 58 W	1 – 150 X 43
M-NP-180	180 X 43	187 X 52 X 11	6 – 30 W	2 – 90 X 43

NEGATIVOSCOPI A DUE SEZIONI ORIZZONTALI

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

Illuminazione omogenea a luce fluorescente con temperatura 6000°K.

Accensione rapida. Interruttori bipolari.

Dispositivo reggipellicola a rullini pressanti.
Diffusore monocromatico bianco.

Normativa di riferimento: CEI EN 61010-1.

Prove di sicurezza apparecchiature elettriche di utilizzo in laboratorio.



CODICE	FORMATO	MISURE ESTERNE CM.	NUMERO LAMPADIE	SEZIONI LUCE
M-NP-121	90 X 86	96 X 99 X 11	3+3 – 30 W	2 – 90 X 43
M-NP-122	120 X 86	126 X 99 X 11	3+3 – 36 W	2 – 120 X 43
M-NP-152	150 X 86	156 X 99 X 11	3+3 – 58 W	2 – 150 X 43
M-NP-182	180 X 86	187 X 99 X 11	6+6 – 30 W	4 – 90 X 43

NEGATIVOSCOPI A SEZIONE VERTICALE

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

Illuminazione omogenea a luce fluorescente con temperatura 6000°K.

Accensione rapida. Interruttori bipolari.

Dispositivo reggipellicola a rullini pressanti. Diffusore monocromatico bianco.

Normativa di riferimento: CEI EN 61010-1.

Prove di sicurezza apparecchiature elettriche di utilizzo in laboratorio.



CODICE	FORMATO	MISURE ESTERNE CM.	NUMERO LAMPADE	SEZIONI LUCE
M-NV-010	30 X 90	35 X 98 X 11	2 – 30 W	1 – 30 X 90
M-NV-020	60 X 90	65 X 98 X 11	3 – 30 W	1 – 60 X 90
M-NV-030	60 X 120	65 X 128 X 11	3 – 36 W	1 – 60 X 120

REGOLATORE LUCE

Regolatore elettronico intensità luminosa.

CODICE	DESCRIZIONE
M-VR-03	Idoneo per tutti i negatoscopi standard

CARRELLO PER NEGATIVOSCOPI

Costruito in tubolare di acciaio verniciato a fuoco e corredato di ruote piroettanti;
Idoneo per sostenere negatioscopi di qualsiasi formato mediante appositi supporti;

CODICE	DESCRIZIONE
M-NC-01	Idoneo per qualsiasi negatioscopio

NEGATIVOSCOPI DA INCASSO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

Cornice esterna in acciaio inox con finitura tipo scotch brite.

Illuminazione a luce fluorescente con temperatura colore 6000°K.

Reggipellicole a rullini pressanti. Diffusore monocromatico bianco.

Completo di morsetteria per collegamento elettrico all'interruttore antideflagrante (escluso).

Normativa di riferimento: CEI EN 61010-1.



CODICE	SEZIONI LUCE CM
M-NI-90	1 – 90 X 43
M-NI-91	2 – 90 X 86
M-NI-120	1 – 120 X 43
M-NI-150	1 – 150 X 43
M-NI-151	2 – 120 X 86

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI



Struttura in profilato di alluminio colore azzurro.

Negativoscopio con retroilluminazione a LED con temperatura colore 7000°K. La luce emanata è perfettamente uniforme ed omogenea così da ridurre l'affaticamento degli occhi.

RIF. B	CODICE	DIM. CAMPO VISIVO MM	MISURE ESTERNE MM.	SEZIONI LUCE
	LED1	360 X 430	473 X 542 X 48	1
	LED2	710 X 430	823 X 542 X 48	2
	LED3	1060 X 430	1173 X 542 X 48	3
	LED4	1410 X 430	1523 X 542 X 48	4

NEGATIVOSCOPI PER MAMMOGRAFIA SERIE ALTA FREQUENZA

Caratteristiche costruttive come quelli ad alta intensità luminosa, ma corredati di alimentatori ad alta frequenza che eliminano l'eventuale sfarfallio delle lampade. Corredati inoltre di speciale variatore dell'intensità luminosa che consente un'ottima regolazione luce dal 100% al 10%. Normativa di riferimento: CEI EN 61010-1.

MODELLI DATAVOLO

CODICE	FORMATO	MISURE ESTERNE	SEZIONI LUCE
M-NM-05/AF	88 X 25	32 X 93 X 9	1 – 88 X 25
M-NM-06/AF	88 X 25 X 2	64 X 93 X 9	2 – 88 X 25

MODELLI DAPARETE

M-NM-07/AF	120 X 30	123 X 37 X 11	1 – 120 X 30
M-NM-08/AF	120 X 30 X 2	123 X 69 X 11	2 – 120 X 30

NEGATIVOSCOPI PER RADIOLOGIA INDUSTRIALE A LED

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, con piano di lettura in materiale opalino che ha la funzione di diffondere uniformemente la luce proveniente dalle piastre illuminanti a diodi led.

E' possibile regolare la luminanza e comandare l'accensione mediante pedale posizionabile a terra o a banco.


La durata degli elementi illuminanti è superiore a 30.000 ore, praticamente infinita.

La qualità della luce rimane eccellente per tutta la durata dei led.



CODICE	FORMATO	MISURE ESTERNE	SEZIONI LUCE	DENSITA'
M-CB-20	Cm 10 X 24	Cm 38 X 19,5 X 21	1 - 10 X 24	3,9
M-CB-22	Cm 10 X 48	Cm 62 X 19,5 X 21	1 - 10 X 48	3,9

SAGOME RADIOTRASPARENTI

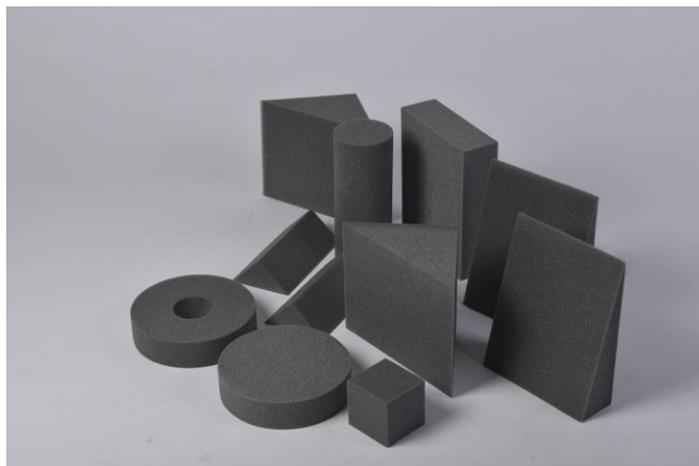

CODICE	DESCRIZIONE
V-BC-01	Sagome radiotrasparenti adatte per il posizionamento dei pazienti. Confezione da 11 pezzi

SAGOME RADIOTRASPARENTI PER CRANIO


CODICE	DESCRIZIONE	
V-BC-11	Sagoma per cranio A/P – RIF. A	
V-BC-12	Sagoma per cranio P/A – RIF. B	
V-BC-13	Sagoma per cranio L/D – RIF. C	
V-BC-14	Sagoma per cranio L/S – RIF. C1	
V-BC-15	Sagoma baby per lattanti – RIF. D	
V-BC-16	Sagoma per bambini piccoli – RIF. D1	

SACCHETTI DI SABBIA

CODICE	DESCRIZIONE
S-SB-01	Sacchetto di sabbia da kg. 2
S-SB-02	Sacchetto di sabbia da kg. 5
S-SB-03	Sacchetto di sabbia da kg. 7,5
S-SB-04	Sacchetto di sabbia da kg. 10
S-SB-05	Sacchetto di sabbia pediatrici da kg. 1,5
S-SB-06	Sacchetto di sabbia pediatrici da kg. 4,5
S-SB-07	Sacchetto di sabbia pediatrici da kg. 6,5
S-SB-08	Sacchetto di sabbia pediatrici da kg. 8,5
S-SB-09	Kit completo di N. 4 sacchetti di sabbia (S-SB-05/06/07/08)
S-SB-10	Kit completo di N. 4 sacchetti di sabbia (S-SB-01/02/03/04)



ACCESSORI PER ORTOPANTOMOGRFO

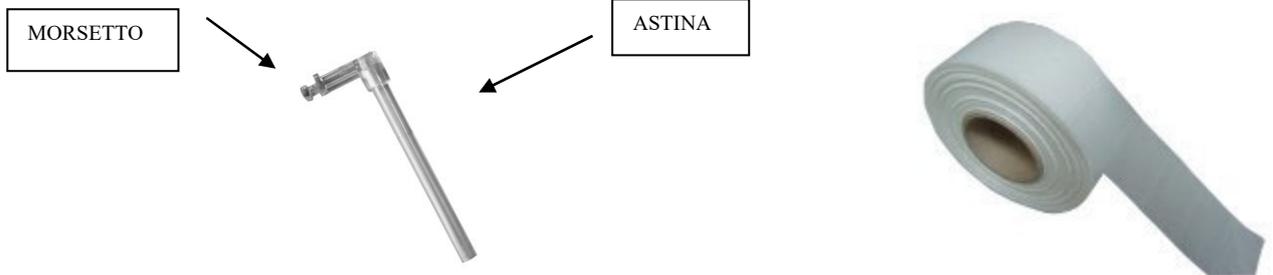

CODICE	DESCRIZIONE
F-PZ-30	Morsetti 500 pz.
F-PZ-31	Astine reggi morso
F-PZ-32	Bustine copri morso 5.500 pz – 250 mt Dim. cm 4,5 x 7
F-PZ-33	Bustine copri morso 10.000 pz – 250 mt Dim. cm 2,5 x 7

SCHERMATURAPER SIRINGHE



Per iniettare isotopi Gamma emittenti in siringhe monouso in Medicina Nucleare. Realizzate in piombo antimoniale spessore mm 4, a forma cilindrica con foro centrale ed estremità rastremata per un miglior inserimento dell'ago. Sono dotate di popolino per bloccaggio siringa e finestrella in cristallo al piombo Eqpb mm 2.0. Verniciatura con vernici decontaminabili. I popolini ed il vetrino della finestrella sono sostituibili in caso di rottura.

CODICE	DESCRIZIONE
M-NU-10	Disponibili per siringhe da 1 cc – 2 cc – 2,5 cc – 5 cc e 10 cc

CASSETTA PORTA SIRINGHE

Per il trasporto di siringhe preparate. Realizzata in lamiera di acciaio verniciata con vernici decontaminabili, con all'interno piombo di prima fusione, con titolo di purezza 99,9%. E' dotata di maniglia di trasporto ribaltabile, cicchetto di chiusura e simbolo di radioattività. Schermatura integrale Pb mm 3.



CODICE	DESCRIZIONE
M-NU-15	Dim. mm 210 x 80 x 70 h c.ca.




PORTA RIFIUTI SCHERMATO

A forma di parallelepipedo per sostanze radioattive solide e liquide. Realizzato interamente in acciaio inox e finitura decontaminabile, dotato di coperchio con comando a pedale, maniglia di trasporto e simbolo di radioattività. Schermatura integrale con Pb mm 2.

CODICE	DESCRIZIONE
M-NU-20	Dim. mm 230 x 230 x 400 h c.ca – Capacità 20 Lt – Peso Kg 20

GREMBIULI ANTIX CON PROTEZIONESCAPOLARE TAGLIAUNICA

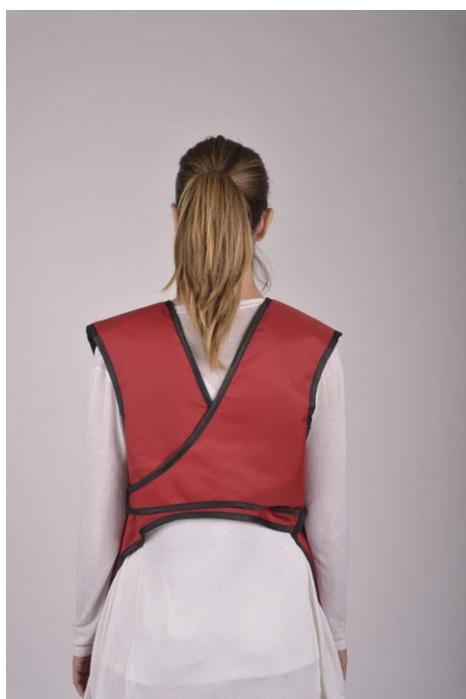

Protezione frontale completa;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Taschino compreso;

Chiusura a scatto;

Facile da indossare e da rimuovere;

Modello Alleggerito.

CODICE	PROTEZIONE ANTERIORE	PROTEZIONE POSTERIORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
KGB10/100	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 60	CM 100
KGB10/110	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 60	CM 110
KGB11	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 60	CM 120
KGB07/100	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 60	CM 100
KGB07/110	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 60	CM 110
KGB08	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 60	CM 120
KGB12/100	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 60	CM 100
KGB12/110	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 60	CM 110
KGB13	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 60	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO				
KGB10/100/NL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 60	CM 100
KGB10/110/NL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 60	CM 110
KGB11/NL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 60	CM 120
KGB07/100/NL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 60	CM 100
KGB07/110/NL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 60	CM 110
KGB08/NL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 60	CM 120
KGB12/100/NL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 60	CM 100
KGB12/110/NL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 60	CM 110
KGB13/NL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 60	CM 120

GREMBIULI ANTIX CON PROTEZIONE FRONTALE TAGLIA UNICA



Protezione frontale completa;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Taschino compreso;

Chiusura con bande a strappo elastiche laterali;

Facile da indossare e da rimuovere.

MODELLI CON PROTEZIONE SOLO FRONTALE

MODELLI CON PROTEZIONE SOLO FRONTALE				
NF25100/A	PB MM 0,25	SENZA PROT.	CM 60	CM 100
NF25110/A	PB MM 0,25	SENZA PROT.	CM 60	CM 110
NF25120/A	PB MM 0,25	SENZA PROT.	CM 60	CM 120
NF35100/A	PB MM 0,35	SENZA PROT.	CM 60	CM 100
NF35110/A	PB MM 0,35	SENZA PROT.	CM 60	CM 110
NF35120/A	PB MM 0,35	SENZA PROT.	CM 60	CM 120
NF50100/A	PB MM 0,50	SENZA PROT.	CM 60	CM 100
NF50110/A	PB MM 0,50	SENZA PROT.	CM 60	CM 110
NF50120/A	PB MM 0,50	SENZA PROT.	CM 60	CM 120

GREMBIULI ANTIX CON PROTEZIONESCAPOLARE



Protezione frontale completa;

Protezionescapolare;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Taschino compreso;

Chiusura con bande a strappo elastiche laterali;

Facile da indossare e da rimuovere.

CODICE	TAGLIA	PROT. FRONTALE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
NS25100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NS25110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NS25120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NS35100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NS35110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NS35120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NS50100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NS50110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NS50120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO				
NS25100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NS25110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NS25120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NS35100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NS35110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NS35120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NS50100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NS50110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NS50120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120

CORPETTO E GONNA CHIUSURA DOPPIOPETTO



Protezione a 360 gradi;
Modello doppiopetto con
pannelli anteriori che
raddoppiano la protezione;

Spalline imbottite per
ridurre l'affaticamento
delle spalle e per una
giusta distribuzione del
peso;

Taschino compreso;
Studiato per potersi sedere
e piegarsi agevolmente.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE
MODELLO ALLEGGERITO			
N2P25/A	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25
N2P35/A	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25
N2P50/A	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25
MODELLO SENZA PIOMBO			
N2P25/NL	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25
N2P35/NL	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25
N2P50/NL	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25

CORPETTO E GONNA LUNGHEPROCEDURE



Protezione a 360 gradi;
Modello lunghe
procedure con chiusura
laterale;

Spalline imbottite per
ridurre l'affaticamento
delle spalle e per una
giusta distribuzione del
peso;

Taschino compreso;
Studiato per potersi
sedere e piegarsi
agevolmente.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE
MODELLO ALLEGGERITO			
N2PS25/A	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25
N2PS35/A	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25
N2PS50/A	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25
MODELLO SENZA PIOMBO			
N2PS25/NL	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25
N2PS35/NL	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25
N2PS50/NL	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25

CORPETTO EGONNA CHIUSURA CENTRALE



Protezione a 360 gradi;
Modello con chiusura
centrale che raddoppia la
protezione nell'area organi
vitali;

Spalline imbottite per ridurre
l'affaticamento delle spalle e
per una giusta distribuzione
del peso;

Taschino compreso; Studiato
per potersi sedere e piegarsi
agevolmente.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE
MODELLO ALLEGGERITO			
N2PC25/A	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25
N2PC35/A	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25
N2PC50/A	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25
MODELLO SENZA PIOMBO			
N2PC25/NL	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25
N2PC35/NL	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25
N2PC50/NL	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25

GREMBIULI ANTIX A CAPPOTTO CHIUSURA DOPPIOPETTO



Protezione a 360 gradi;
Modello doppiopetto
con pannelli anteriori che
raddoppiano la
protezione;

Spalline imbottite per
ridurre l'affaticamento
delle spalle e per una
giusta distribuzione del
peso;

Cintura elastica per
ridurre l'affaticamento
lombare;

Taschino compreso;
Studiato per potersi
sedere e piegarsi
agevolmente.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
NC25100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NC25110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NC25120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NC35100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NC35110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NC35120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NC50100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NC50110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NC50120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO				
NC25100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NC25110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NC25120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NC35100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NC35110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NC35120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NC50100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NC50110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NC50120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120

GREMBIULI ANTIX A CAPPOTTO CHIUSURA LATERALE



Protezione a 360 gradi;
Modello lunghe
procedure con chiusura
laterale;

Spalline imbottite per
ridurre l'affaticamento
delle spalle e per una
giusta distribuzione del
peso;

Cintura elastica per
ridurre l'affaticamento
lombare;

Taschino compreso;
Studiato per potersi
sedere e piegarsi
agevolmente.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
NCS25100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCS25110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCS25120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCS35100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCS35110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCS35120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCS50100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCS50110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCS50120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO				
NCS25100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCS25110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCS25120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCS35100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCS35110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCS35120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCS50100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCS50110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCS50120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120

GREMBIULI ANTIX A CAPPOTTO CHIUSURA CENTRALE



Protezione a 360 gradi;

Modello con chiusura centrale che raddoppia la protezione nell'area organi vitali;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Cintura elastica per ridurre l'affaticamento lombare;

Taschino compreso;
Studiato per potersi sedere e piegarsi agevolmente.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
NCC25100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCC25110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCC25120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCC35100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCC35110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCC35120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCC50100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCC50110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCC50120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO				
NCC25100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCC25110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCC25120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCC35100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCC35110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCC35120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCC50100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCC50110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCC50120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120

GREMBIULI ANTIX PER CHIRURGIA



Protezione frontale completa e protezione scapolare;

Chiusura con bande a strappo elastiche laterali;

Idoneo per utilizzo in sala chirurgica poiché caratterizzato da sgancio rapido che ne agevola la rimozione;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Taschino compreso;

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
NCH25100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCH25110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCH25120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCH35100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCH35110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCH35120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCH50100/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCH50110/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCH50120/A	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO				
NCH25100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCH25110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCH25120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCH35100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCH35110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCH35120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCH50100/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCH50110/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCH50120/NL	S/M/L/XL/XXL	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120

GREMBIULI ANTIX ODONTOIATRICI



Protezione frontale;

Disponibile con e senza protezione tiroidea;

Idoneo per l'esecuzione di radiografie endorali.

CODICE	TAGLIA	PROTEZIONE	MODELLO
MODELLO ALLEGGERITO			
O-GD-21	BAMBINO	PB MM 0,50	CON COLLETO
O-GD-22	ADULTO	PB MM 0,50	CON COLLETO
O-GD-26	BAMBINO	PB MM 0,50	SENZA COLLETO
O-GD-27	ADULTO	PB MM 0,50	SENZA COLLETO

GREMBIULI ANTIX PER ESAMI PANORAMICI



Protezione frontale;

Protezione frontale, spalle e spina dorsale;

Idoneo per l'esecuzione di panoramiche.

CODICE	TAGLIA	PROTEZIONE
MODELLO ALLEGERITO		
O-GD-41	ADULTO	PB MM 0,50
O-GD-42	BAMBINO	PB MM 0,50
O-GD-43	ADULTO	PB MM 0,25
O-GD-44	BAMBINO	PB MM 0,25

GREMBIULI ANTIX PER BAMBINI CON PROTEZIONE SCAPOLARE



Protezione frontale completa e protezione scapolare;

Chiusura con bande a strappo elastiche laterali;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Personalizzabile con rivestimento in fantasie per maschietti e femminucce;

Modello Alleggerito.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
O-LM-50	SMALL	PB MM 0,50	PB MM 0,50	CM 50
O-LM-60	MEDIUM	PB MM 0,50	PB MM 0,50	CM 60
O-LM-70	LARGE	PB MM 0,50	PB MM 0,50	CM 70

GREMBIULI ANTIX PER BAMBINI A CAPPOTTO



Protezione a 360 gradi;

Modello con chiusura centrale che raddoppia la protezione nell'area organi vitali;

Spalline imbottite per ridurre l'affaticamento delle spalle e per una giusta distribuzione del peso;

Personalizzabile con rivestimento in fantasie per maschietti e femminucce;

Modello Alleggerito.

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO ALLEGGERITO				
O-MT-50	SMALL	PB MM 0,50	PB MM 0,50	CM 50
O-MT-60	MEDIUM	PB MM 0,50	PB MM 0,50	CM 60
O-MT-70	LARGE	PB MM 0,50	PB MM 0,50	CM 70

ACCESSORI PER GREMBIULI

CODICE	DESCRIZIONE
O-GT-25	Personalizzazione grembiuli a mezzo ricamo (scritta - no logo)
O-GT-25/A	Personalizzazione grembiuli a mezzo ricamo (logo/disegno) **** necessario file vettoriale ****
O-GT-26	Gruccia appendi camici in acciaio
O-GF-53	Protezione spalla / gomito Pb mm 0,25 – Mod. Alleggerito
O-GF-54	Protezione spalla / gomito Pb mm 0,35 – Mod. Alleggerito
O-GF-55	Protezione spalla / gomito Pb mm 0,25 – Mod. No Lead
O-GF-56	Protezione spalla / gomito Pb mm 0,35 – Mod. No Lead

REGGIGREMBIULI MURALI

Prodotti in lamiera di tubolare d'acciaio verniciato colore bianco, completi di staffe girevoli.



CODICE	POSTI	MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE
O-RG-01	1	MURALE	Piastra di fissaggio cm L 34 x H 15 Larghezza staffe cm 56 cad. Larghezza totale con staffe aperte cm 120
O-RG-03	3	MURALE	Piastra di fissaggio cm L 34 x H 15 Larghezza staffe cm 56 cad. Larghezza totale con staffe aperte cm 120.
O-RG-06	6	MURALE	Piastra di fissaggio cm L 34 x H 15 Larghezza staffe cm 56 cad. Larghezza totale con staffe aperte cm 120.

REGGIGREMBIULI MOBILI

Prodotti in lamiera di tubolare d'acciaio verniciato colore bianco, completi di staffe girevoli.

Scorrevoli su ruote piroettanti di cui due con freno.



CODICE	POSTI	MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE
O-RG-09	3	MOBILE	Dim.cm L 48 x P 70 x H 160 Larghezza staffe cm 56 cad. Larghezza totale con staffe aperte cm 120.
O-RG-10	6	MOBILE	Dim.cm L 48 x P 70 x H 160 Larghezza staffe cm 56 cad. Orientabili fino a 180° Larghezza totale con staffe aperte cm 120.
O-RG-11	12	MOBILE	Dim.cm L 48 x P 70 x H 160 Larghezza staffe cm 56 cad. Orientabili fino a 180° Larghezza totale con staffe aperte cm 120.
O-RG-12	9	MOBILE	Dim.cm L 48 x P 70 x H 160 Larghezza staffe cm 56 cad. Orientabili fino a 180° Larghezza totale con staffe aperte cm 120.

PROTEZIONE DEL BACINO

In gomma piombifera ricoperta da elegante tessuto in nylon bordato perimetralmente.

Equivalenza piombo mm 0,50.

MODELLO CON CINTURA A VELCRO:


CODICE	DESCRIZIONE	
O-GB-70	Adatto per bambini Dim. cm 20 x 25	
O-GB-71	Adatto per ragazzi Dim. cm 30 x 30	
O-GB-72	Adatto per adulti Dim. cm 40 x 40	
O-GB-73	Adatto per adulti Dim. cm 50 x 50	

PROTEZIONE SENO

Protezioni del seno per operatrici e pazienti.

CODICE	DESCRIZIONE	
O-PS-20	PB MM 0,50 Modello per adulti.	
O-PS-30	PB MM 0,50 Modello pediatrico.	

COLLARI ANTIX

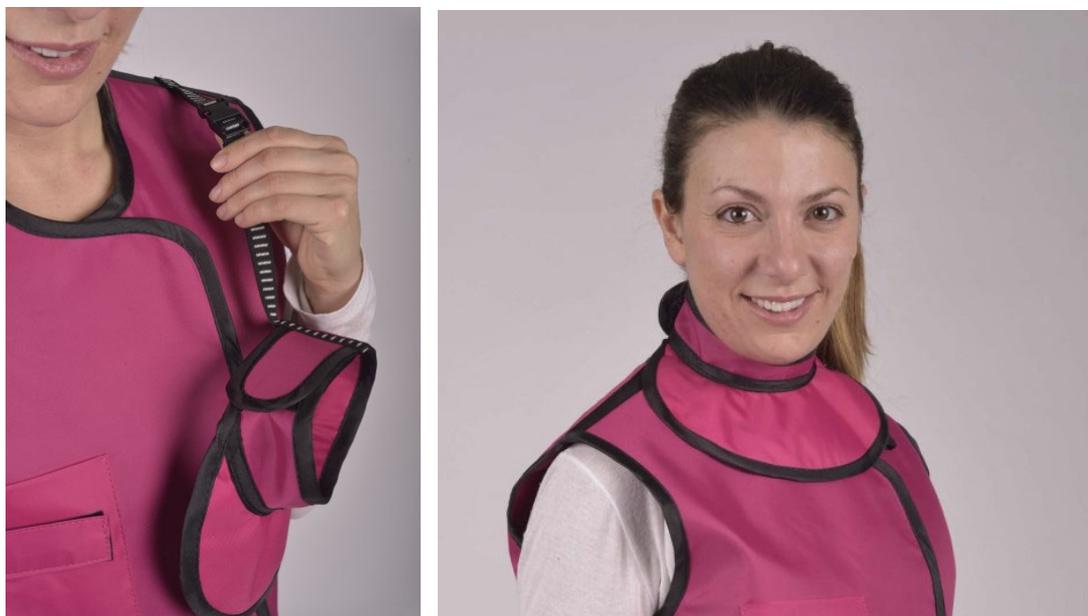

Questo modello protegge la parte frontale del collo (tiroide) e parte dello sterno; si allaccia con velcro nella parte posteriore.

Prodotto in gomma piombifera rivestita in elegante nylon.

E' opportuno usarlo con un grembiule antix.

A richiesta può essere prodotto con "cinturino d'aggancio al grembiule" al fine di evitarne lo smarrimento.

CODICE	COLLO	PROTEZIONE	PETTORINA
O-GD-36	CM 29/40	PB MM 0,50	NO
O-GD-40	CM 29/40	PB MM 0,50	SI
O-GD-52	CM 29/40	PB MM 0,50 NO LEAD	SI

COLLARI ANTIX COLLO E NUCA



Questo modello protegge la parte frontale del collo (tiroide), la nuca e parte dello sterno; si allaccia con velcro nella parte posteriore.

Prodotto in gomma piombifera rivestita in elegante nylon.

E' opportuno usarlo con un grembiule antix.

A richiesta può essere prodotto con "cinturino d'aggancio al grembiule" al fine di evitarne lo smarrimento.

CODICE	COLLO	PROTEZIONE
O-GD-47	CM 29/40	PB MM 0,50

COPRICOLLARE IN COTONE

Copricollare in cotone lavabile

Idoneo per modello con pettorina



CODICE

C-OP-CO

PROTEZIONI SCROTALI



Prodotto in gomma piombifera rivestita in elegante nylon.

Il set comprende 50 protezioni monouso.

CODICE	DESCRIZIONE	
O-GI-06	PROT. SCROTALI PB MM 1 Serie composta da n. 4 misure. Il set comprende 50 protezioni monouso	
O-GI-06/A	PROT. SCROTALI PB MM 1 Modello 8 anni	
O-GI-06/B	PROT. SCROTALI PB MM 1 Modello 12 anni	
O-GI-06/C	PROT. SCROTALI PB MM 1 Modello 16 anni	
O-GI-06/D	PROT. SCROTALI PB MM 1 Modello adulto	

PROTEZIONI OVARICHE



Prodotto in gomma piombifera rivestita in elegante nylon.

Modello con cintura regolabile con chiusura a scatto.

CODICE	DESCRIZIONE
O-GI-23	PROT.OVARICHE PB MM 1 Serie composta da n. 6 misure. Modello con cintura regolabile.
O-GI-23/A	PROT.OVARICHE PB MM 1 Modello 1 anno
O-GI-23/B	PROT.OVARICHE PB MM 1 Modello 4 anni
O-GI-23/C	PROT.OVARICHE PB MM 1 Modello 8 anni
O-GI-23/D	PROT.OVARICHE PB MM 1 Modello 12 anni
O-GI-23/E	PROT.OVARICHE PB MM 1 Modello 16 anni
O-GI-23/F	PROT.OVARICHE PB MM 1 Modello adulto



PROTEZIONI GONADI

Prodotto in gomma piombifera rivestita in elegante nylon.

Modello con cintura regolabile con chiusura a scatto.

CODICE	DESCRIZIONE	
O-GI-05	PROT. SCROTALE PB MM2 Serie composta da n. 4 misure. Modello atazzina.	
O-GI-22	PROT. OVARICHE PB MM 1 Serie composta da n.5 misure. Modello a piastra.	

OCCHIALI ANTIX

CODICE	DESCRIZIONE	
O-OC-100	Banda oculare pb mm 0,50	
O-OC-105	Prot. Frontale eqpb mm 0,50 Montatura in materiale plastico leopardato.	
O-OC-112	Prot. Frontale eqpb mm 0,75 Prot. Laterale eqpb mm 0,50 Montatura in materiale plastico.	
O-OC-115	Protezione frontale Pb mm 0,75. Montatura in materiale plastico / acetato.	
O-OC-133	Prot. Frontale eqpb mm 0,75 Prot. Laterale eqpb mm 0,75 Portabili sopra gli occhiali da vista. Montatura in materiale plastico.	
O-OC-116	Prot. Frontale eqpb mm 0,75 Prot. Laterale eqpb mm 0,50 Montatura in materiale plastico.	

MASCHERE ANTIX

CODICE	DESCRIZIONE	
O-MC-01	Maschera antix <u>totale</u> Pb mm 0,1	
O-MC-02	Maschera antix <u>parziale</u> Pb mm 0,1	

GUANTI ANTIX

Prodotti in gomma piombifero rivestiti in tessuto blu.

Rivestimento interno in cotone grigio.

CODICE	DESCRIZIONE	
O-GU-011	Guanti anti-x Pb mm 0,35 Taglia unica.	
O-GU-012	Guanti anti-x Pb mm 0,50 Taglia unica.	

GUANTI ANTIX CON APERTURA PALMARE

Prodotti in gomma piombifera rivestiti in nylon blu.

Modello con apertura palmare, idonei per l'utilizzo di siringhe.

CODICE	DESCRIZIONE	
O-GU-210	Guanti anti-x Pb mm 0,35 Taglia unica.	
O-GU-212	Guanti anti-x Pb mm 0,50 Taglia unica.	

GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI

Guanti di protezione limitata antiradiazioni, in lattice di gomma naturale arricchita di polveri di piombo.

La particolare composizione della miscela e la forma anatomica a dita flesse, conferiscono a questi guanti le caratteristiche di morbidezza, elasticità, comodità e calzabilità dei guanti chirurgici.

Misure disponibili: 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 - 9

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Cardiologia interventzionistica;
- Radiologia interventzionistica;
- Urologia interventzionistica;
- Gastroenterologia interventzionistica;
- Neuro-radiologia interventzionistica;
- Ortopedia;
- Medicina nucleare;
- Terapia del dolore;
- Emodinamica;
- Endoscopia;
- Terapia intensiva;
- Elettrofisiologia;



CODICE	MODELLO	SPESSORE	EQUIVALENZA IN PIOMBO	60 KVP	80 KVP	100 KVP	120 KVP
O-GU-219	LEGGERO	0,22 ± 0,02 mm	PB MM 0,016	45%	35%	26%	23%
O-GU-220	MEDIO	0,30 ± 0,02 mm	PB MM 0,020	55%	43%	35%	31%

CONFEZIONE DA 5 PAIA DI GUANTI – NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

CODICE	MODELLO	SPESSORE	EQUIVALENZA IN PIOMBO	60 KVP	80 KVP	100 KVP	120 KVP
O-GU-221	PESANTE	0,60 ± 0,02 mm	PB MM 0,032	81%	69%	62%	59%

CONFEZIONE DA 3 PAIA DI GUANTI – NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

TELI ANTIX



Prodotto in gomma piombifera rivestita in elegante nylon; bordature perimetrali antistrappo.

Utilizzabili per la protezione dei pazienti.

Modello Alleggerito.

CODICE	DESCRIZIONE
O-TA-60	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 100 x 80
O-TA-61	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 120 x 80
O-TA-62	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 150 x 80
O-TA-63	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 100 x 100
O-TA-64	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 120 x 100
O-TA-65	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 150 x 100

SCHERMI DI PROTEZIONE PER RADIOLOGIA VASCOLARE

Schermo mobili composto da pannello antix Pb mm 1 nella parte inferiore (cm 70 x 115 h) e da cristallo antix acrilico Pb mm 0,50 nella parte superiore.

Il cristallo è estendibile in altezza da cm 115 a cm 190.

Scorrevole su ruote piroettanti.

Idoneo per uso in radiologia vascolare-chirurgica.



CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-40	Schermo di protezione per radiologia vascolare-chirurgica

Composto da robusta struttura metallica che sostiene nella parte superiore n. 1 cristallo antix acrilico Pb mm 0,50 sagomato dim. cm 116x50 h e nella parte inferiore n. 2 grembiuli antix cm 48x80h - Pb mm 0,50 di cui uno estendibile in orizzontale.

Sia il cristallo che i grembiuli sono regolabili in altezza mediante sistema di bilanciamento da cm 146 a cm 177.

Idoneo per uso radiologico in chirurgia vascolare.



CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-41	Schermo di protezione per chirurgia vascolare con cristallo sagomato

PARETI MOBILI ANTIX



Pareti mobili di protezione, scorrevoli su ruote gommata con freno di bloccaggio.

Struttura portante in tubolare di acciaio verniciata a fuoco.

Pannello antix Pb mm 2, con rivestimento totale in laminato plastico colore bianco con bordi in PVC antiurto.

Complete di visiva con cristallo antix Eq Pb mm 2.



CODICE	DIMENSIONI	ANTA	VISIVA
P-PM-05	Dim. cm 80 X 190 h	1	Dim. cm 30 X 20 h
P-PM-01	Dim. cm 80 X 190 h	1	Dim. cm 30 X 24 h
P-PM-02	Dim. cm 80 X 190 h	1	Dim. cm 40 X 30 h
P-PM-06	Dim. cm 30+80+30 X 190 h	3	Dim. cm 30 X 20 h
P-PM-03	Dim. cm 30+80+30 X 190 h	3	Dim. cm 30 X 24 h
P-PM-04	Dim. cm 30+80+30 X 190 h	3	Dim. cm 40 X 30 h

SCHERMI MOBILI ANTIX

Composti da un unico pannello antix con rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati.

A richiesta il laminato plastico può essere scelto tra un'ampia gamma di colori.

Bordatura perimetrale in PVC antiurto.

Scorrevoli su ruote piroettanti di cui due con freno di bloccaggio.



CODICE	SCHERMATURA	DIMENSIONI ESTERNE
S-SM-13	Pb mm 1	Dim. cm 100 x 150 h
S-SM-14	Pb mm 1	Dim. cm 120 x 150 h
S-SM-15	Pb mm 2	Dim. cm 100 x 150 h
S-SM-16	Pb mm 2	Dim. cm 120 x 150 h

SCHERMI MOBILI CON VISIVA ANTIX

Composti da pannello antix nella parte inferiore con rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati e cristallo antix nella parte superiore per tutta la larghezza.

A richiesta il laminato plastico può essere scelto tra un'ampia gamma di colori.

Struttura perimetrale in alluminio anodizzato.

Scorrevoli su ruote piroettanti di cui due freno di bloccaggio.



CODICE	SCHERMATURA	DIMENSIONI ESTERNE	VISIVA CEE ORIGIN
S-SM-20	Pb mm 2	CM 82 X 198H	CM 80 X 60H
S-SM-21	Pb mm 2	CM 82 X 198H	CM 80 X 80H
S-SM-22	Pb mm 2	CM 102 X 198H	CM 100 X 60H
S-SM-23	Pb mm 2	CM 102 X 198H	CM 100 X 80H
S-SM-24	Pb mm 2	CM 122 X 198H	CM 120 X 60H
S-SM-25	Pb mm 2	CM 122 X 198H	CM 120 X 80H
S-SM-26	Pb mm 2	CM 142 X 198H	CM 140 X 60H
S-SM-27	Pb mm 2	CM 142 X 198H	CM 140 X 80H

CODICE	SCHERMATURA	DIMENSIONI ESTERNE	VISIVA EXTRACEE ORIGIN
S-SM-20/JP	Pb mm 2	CM 82 X 198H	CM 80 X 60H
S-SM-21/JP	Pb mm 2	CM 82 X 198H	CM 80 X 80H
S-SM-22/JP	Pb mm 2	CM 102 X 198H	CM 100 X 60H
S-SM-23/JP	Pb mm 2	CM 102 X 198H	CM 100 X 80H
S-SM-24/JP	Pb mm 2	CM 122 X 198H	CM 120 X 60H
S-SM-25/JP	Pb mm 2	CM 122 X 198H	CM 120 X 80H
S-SM-26/JP	Pb mm 2	CM 142 X 198H	CM 140 X 60H
S-SM-27/JP	Pb mm 2	CM 142 X 198H	CM 140 X 80H

STATIVO PENSILE PER PROTEZIONE ANTIX

Stativo pensile per la protezione di occhi e tiroide, per impiego in reparti di angiografia, urologia etc.

Si compone di un supporto fisso da applicare a soffitto, da un braccio mobile (lunghezza cm 80) articolato e controilanciato (può ruotare di 315 gradi) e da un ulteriore braccio (lunghezza cm 80) con movimento verso l'alto e verso il basso di 50 gradi (può ruotare di 360 gradi).

Quest'ultimo porta all'estremità inferiore un telaio con cristallo antixEq. Pb mm 1,5 - cm 50 x 40 h e n. 1 telo a strisce Eq Pb 0,50 mm dim. cm 50 x 40 h.

Predisposto per altezze pav/soff. da mt 2,70 a mt 3,00 da precisare in fase d'ordine.



CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-11	Stativo per soffitto con cristallo 50x40
V-SP-23	Lampada anombra 35.000 LUX RA 93/1mt Con focalizzazione fissa cm 17. Completa di braccio mobile elettrificato.
V-SP-24	Lampada anombra 50.000 LUX RA 96/1mt Con luce diaframmabile cm 14-25. Completa di braccio mobile elettrificato.
V-SP-32	Castello di prolunga per ancoraggio a soffitto. Idoneo per altezze "pavimento-soffitto" superiori a mt 3
V-SP-33	Sistema di scorrimento a soffitto Lunghezza massima cm 250

N.B. Per l'installazione dello stativo pensile sono necessarie delle semplici opere murarie a carico del Cliente su nostre indicazioni.

GREMBIULE ANTIX PER TAVOLI OPERATORI

Dispositivo di protezione antix da applicare ai tavoli operatori.

Realizzato con 1 grembiule antix, eq.Pb mm 0,50 applicato ad un braccio mobile snodato da agganciare al tavolo operatorio mediante adattatore a slitta da inserire sulle sbarre del lettino (dim. cm 10x25).

Essendo il braccio mobile snodato consente una schermatura totale di 90°.


Corredato inoltre di grembiolino antix asportabile da posizionare nella parte superiore.

Dimensione grembiule cm 90x75 h (40+50x75 h).



CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-80	Grembiule antix per tavolo operatorio MODELLO FISSO

PROTEZIONE ANTIX MOBILE

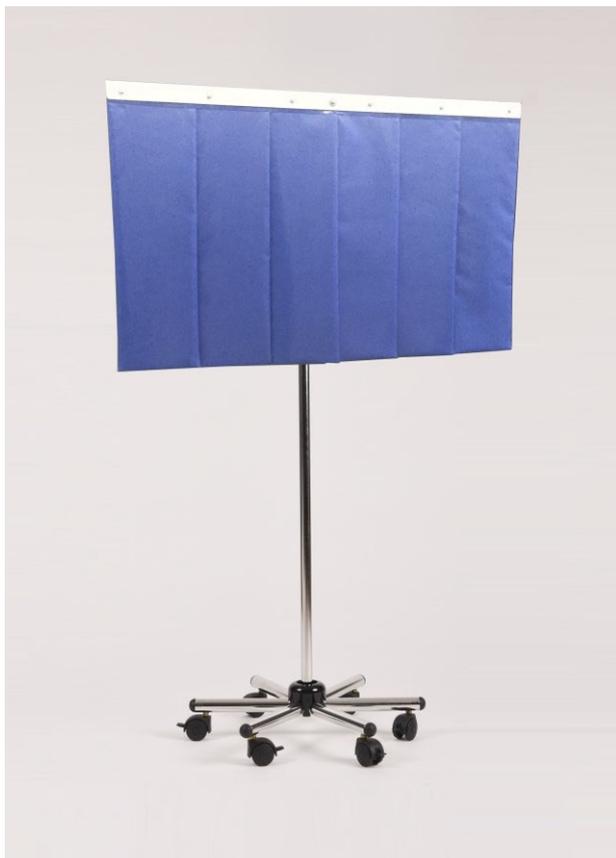

Protezione antix mobile costituita da telo antix Pb mm 0,50 suddiviso in n. 6 strisce in gomma piombifera ricoperta da elegante rivestimento in nylon.

A richiesta il telo può essere prodotto con diverse modalità di suddivisione.

Dim. telo cm 80 x 50 h - Asta telescopica da cm 77 a cm 120.

CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-81	Protezione antix mobile Pb mm 0,50

BARELLE PER RISONANZA MAGNETICA AD ALTEZZA VARIABILE

Realizzata in acciaio inossidabile;

Idonea per trasportare i pazienti in risonanza magnetica.

Disponibili in con o senza sponde laterali di sicurezza;

Scorrevoli su quattro ruote di cui due con freno.

Altezza regolabile.

Piano a due sezioni; la superiore è regolabile con meccanismo di bloccaggio.

Materassino incorporato.

-> ETICHETTATURA "MR CONDITIONAL"



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-91	BARELLA PER RISONANZA MAGNETICA AD ALTEZZA VARIABILE Con sponde laterali di sicurezza

BARELLA PER RISONANZA MAGNETICA IN PVC RINFORZATO

Realizzata in PVC rinforzato;

Idonea per trasportare i
pazienti in risonanza
magnetica;

Pianale realizzato in robusto
tessuto in Textilene® (non è
previsto l'uso del materassino);

Altezza fissa;

Sponde laterali ribaltabili;

N. 4 ruote piroettanti con freno;

Dim. esterne cm 197 x 82 x 87,5

h Dim. pianale cm 186 x 59,5 x

76,5 h

-> ETICHETTATURA "MR SAFE"



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-93	BARELLA PER RISONANZA MAGNETICA in PVC rinforzato

SGABELLO PER RISONANZA MAGNETICA IN PVC RINFORZATO

Realizzato in PVC rinforzato;

Seduta ergonomica imbottita;

Altezza fissa;

N. 4 ruote con freno;

Dimensioni esterne: cm 52 x 52 x 50 h

Dimensioni seduta: cm 42 x 42 x 48,5 h

Portata: 150 kg

-> ETICHETTATURA "MR SAFE"



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-90	SGABELLO PER RISONANZA MAGNETICA Scorrevole su ruote

Realizzato in PVC rinforzato;

Seduta ergonomica imbottita;

Altezza fissa;

Dimensioni esterne: cm 42 x 42 x 49 h

Dimensioni seduta: cm 42 x 42 x 48 h

Portata: 200 kg

-> ETICHETTATURA "MR SAFE"



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-90	SGABELLO PER RISONANZA MAGNETICA Modello fisso

SEDIA AMAGNETICA



Struttura in acciaio inox316;

Seduta e schienale rivestiti con morbida similpelle ignifuga lavabile;

Poggiapiedi ribaltabile;

Scorrevole su n° 4 ruote piroettanti in acciaio inox diametro mm 100 di cui n° 2 con freno;

Movimentazione mediante n° 2 comode impugnature in gomma antiscivolo;

-> ETICHETTATURA "MR CONDITIONAL"

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-10	Sedia Amagnetica

SEDIA AMAGNETICA IN PVC



Sedia amagnetica in PVC rinforzato compatibile con ogni tipo di risonanza magnetica fino a 3 tesla.

Seduta e schienale in pur morbido.

Entrambi i braccioli sono dotati di imbottitura e sono apribili lateralmente per il trasferimento del paziente

Poggiapiedi estraibile a scomparsa

Dim. esterne cm 65 x 55 x 112,5 h

Dim. seduta cm 45 x 44 x 57 h

Portata: kg 150

-> ETICHETTATURA "MR SAFE"

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-30	Sedia Amagnetica in PVC

CARROZZINA AMAGNETICA IN PVC RINFORZATO



Realizzata in PVC rinforzato;

Adatta per spingersi autonomamente

Ruote antiforatura 24" con assali in ottone e cuscinetti in plastica

Braccioli apribili lateralmente per il trasferimento del paziente

Poggiapiedi estraibile a scomparsa

Schienale morbido in schiuma PUR, rimovibile per una facile pulizia

Seduta ergonomica imbottita

Maniglione di spinta

Dim. esterne cm 79,5 x 72 x 107,5 h

Dim. seduta cm 45 x 44 x 57 h

Portata: kg 150

-> ETICHETTATURA "MR SAFE"

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-35	Carrozzina in PVC rinforzato

ESTINTORI AMAGNETICI

Estintore ad anidride carbonica (CO2)

Omologazione Ministeriale.

Idonei per utilizzo in sala di Risonanza Magnetica.



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-08	Estintore amagnetico – Kg 2
R-MN-02	Estintore amagnetico – Kg 5

METAL DETECTOR

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-01	<p>Metal detector portatile, localizzatore di piccole dimensioni, ad alta sensibilità per consentire controlli più approfonditi sulle persone permettendo in questo modo l'esatta localizzazione dell'oggetto metallico sospetto il cui rilevamento è segnalato da un avviso acustico e visivo con l'accensione di una spia rossa. Permette di individuare tutti i tipi di metalli.</p> 

PREDELLINO AMAGNETICO

CODICE	DESCRIZIONE	
<p>R-MN-12</p>	<p>Struttura un tubolare di alluminio anodizzato. Ripiani rivestiti in gomma antiscivolo. Braccio di appoggio laterale. Dim. cm 40 x 46 x 40 h -> ETICHETTATURA "MR CONDITIONAL"</p>	

PIANTANA AMAGNETICA

CODICE	DESCRIZIONE	
<p>R-MN-03</p>	<p>Piantana amagnetica telescopica. -> ETICHETTATURA "MR CONDITIONAL"</p>	

CARRELLI PER RISONANZA MAGNETICA

Carrello idoneo per risonanza magnetica fino a 3 Tesla.

Prodotto in alluminio e materiale sintetico colore grigio chiaro.

Dotato di n. 2 ripiani e n. 2 maniglie per la movimentazione.

Scorrevole su quattro ruote.

-> ETICHETTATURA "MR CONDITIONAL"



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-11	Carrello a due ripiani per risonanza magnetica fino a 3 Tesla

CARRELLI D' EMERGENZA IN PLASTICA

Struttura in poliuretano con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.

Può essere facilmente lavato e disinfettato. Il materiale non reagisce con acidi diluiti, alcali e solventi.

Maniglie stampate ed integrate nel corpo carrello.

Cassetto narcotici/salva-vita incluso nella struttura del carrello; grazie alla superficie trasparente, l'identificazione del farmaco necessario ad un'emergenza è immediata.

Chiusura dei cassetti e cassette monodose garantita da un sistema centralizzato a chiave o sigillo.

Bacinella di medicazione autoclavabile.

Portarifiuti con coperchio integrato e facilmente accessibile.

Scorrevole su quattro ruote.



R-MN-33



R-MN-34

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-33	Carrello d'emergenza in poliuretano - Dim. mm 830 X 715 X 910 H - n. 3 cassetti H 100mm - n. 2 cassetti H150mm
R-MN-34	Carrello d'emergenza in poliuretano - Dim. mm 970 X 625 X 960 H - n. 4 cassetti H 150 mm

CARRELLO PER SERVITORE AMAGNETICO



Prodotto in alluminio saldato;

Pianale 700 mm x 500 mm,
inclinabile lateralmente a 45
gradi;

Altezza regolabile da 800 mm a
1300 mm con vite di bloccaggio;

Struttura a forma di H;

Ruote antistatiche ed
anticorrosione;

Verniciato a polvere RAL 1013
bianco perla

-> ETICHETTATURA "MR
CONDITIONAL"

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-36	Carrello per servitore amagnetico

CARTELLI SEGNALETICI MULTIFUNZIONE

Segnale generico di "ATTENZIONE CAMPO MAGNETICO E DI ALTA FREQUENZA"

Divieto di fumare e/o usare fiamme libere.

Divieto di introdurre orologi o simili e carte di credito.

Divieto di introdurre materiali magnetici.

Divieto di accesso ai portatori di protesi metalliche.

Divieto di utilizzare estintori inadatti.



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-07	Cartello segnaletico - Dim. cm 50 X 70 h

TAPPI AMAGNETICI ANTIRUMORE

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-16	Distributore da 250 pz
R-MN-17	Distributore da 500 pz
R-MN-18	Supporto murale
R-MN-29	Inserti auricolari monouso (scatola)



CUFFIE AMAGNETICHE ANTIRUMORE


CODICE	DESCRIZIONE	
R-MN-14	Cuffie amagnetiche antirumore -> ETICHETTATURA "MR SAFE"	
R-MN-15/A	Protezioni igieniche antisudore usa e getta Conf. 100 pz	

ATTENUATORI ACUSTICI AMAGNETICI NEONATALI E PREMATURI - MONOUSO

Progettati specificamente per i neonati e prematuri; riducono il suono di almeno 7 Db; utilizzato in combinazione con i tappi, i livelli di rumore all'interno della Risonanza Magnetica sono ridotti significativamente.

Possono anche essere utilizzati per ridurre i livelli di rumore associati al trasferimento dei neonati tra diverse unità ospedaliere e/o in veicoli di emergenza.

Il design di forma ovale permette di applicare comodamente, tramite idrogel adesivo neonatale, gli attenuatori intorno alle orecchie del neonato.

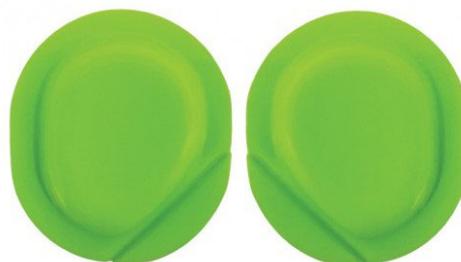

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-19	Attenuatori acustici neonatali confezione da 30 coppie

STETOSCOPIO AMAGNETICO

Lo stetoscopio MRI garantisce funzioni multiple ed offre estese capacità di auscultazione, spaziando dalle bassissime frequenze 20-100Hz del sottofondo cardiaco, alle frequenze più alte 100 500 Hz associate ai rigurgiti polmonari e dell'aorta.

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-21	Laringoscopio amagnetico



LARINGOSCOPIO AMAGNETICO

Laringoscopio amagnetico con pratica custodia per il trasporto.


Composto da manipolo standard, lama MAC#3, lama MAC#2, lama MAC#1, valigetta per il trasporto, adattatore batteria.



CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-20	Stetoscopio amagnetico

ARMADIO AMAGNETICO PORTA BOBINE A 3/4/5 MODULI

Realizzato in nobilitato antigraffio colore bianco opaco con bordi in P.V.C. nero arrotondati. Idoneo per il deposito di bobine e accessori vari

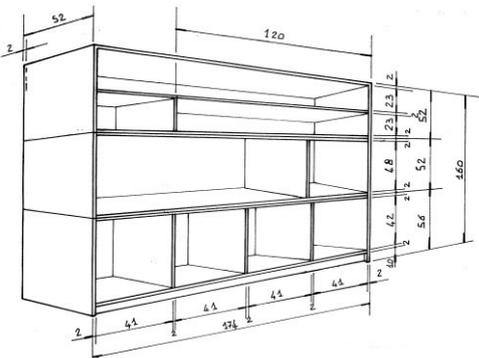CODICE	DESCRIZIONE	
<p>R-MN-27</p>	<p>Modello a 3 moduli liberamente sovrapponibili – vani a giorno. Dim. cm 174 x 52 x 160 h</p>	
<p>R-MN-05</p>	<p>Modello a 4 moduli suddiviso in: n. 3 moduli vani a giorno con ripiani nella parte superiore n. 1 modulo inferiore con n. 2 ante incernierate e n. 2 cassetti. Dim. cm 150 x 60 x 170 h</p>	
<p>R-MN-06</p>	<p>Modello a 5 moduli suddiviso in: n. 3 ante incernierate nel primo modulo; n. 3 moduli a giorno con ripiani nella parte centrale; n. 1 modulo inferiore con n. 2 ante incernierate e n. 2 cassetti Dim. cm 150 x 60 x 210 h</p>	

ARMADIO AMAGNETICO PORTA OGGETTI

CODICE	DESCRIZIONE	
R-MN-04	<p>Armadio amagnetico porta oggetti personali del paziente.</p> <p>Composto da n. 2 moduli sovrapponibili:</p> <p>modulo superiore a 6 scomparti dotati di chiave amagnetica e n° di identificazione;</p> <p>modulo inferiore con 2 vani a giorno;</p> <p>Dim. cm 70 x 45 x 175 h</p>	
R-MN-04/A	<p>Armadio amagnetico porta oggetti personali del paziente:</p> <p>SOLO MODULO SUPERIORE</p> <p>Dim. cm 70 x 30 x 95 h</p>	
R-MN-04/B	<p>Cassetta porta valori</p> <p>Dotata di n. 1 serratura amagnetica.</p> <p>Dim. cm 25 x 45 x 35 h</p>	

CRISTALLI ANTIX @150kV ORIGINE EUROPEA

CODICE	DIMENSIONI	EQUIVALENZA PIOMBO	SPESSORE
Q-CR-01	cm 30 x 24 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-02	cm 40 x 30 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-05	cm 50 x 40 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-06	cm 60 x 40 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-10	cm 60 x 50 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-12	cm 100 x 50 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-13	cm 80 x 60 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-14	cm 100 x 60 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-15	cm 80 x 80 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-16	cm 100 x 80 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-17	cm 120 x 80 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-18	cm 140 x 80 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-101	cm 200 x 100 h	EQ PB MM 2.1	MM 7 / 8,5
Q-CR-19	cm 100 x 50 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13
Q-CR-20	cm 80 x 60 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13
Q-CR-21	cm 100 x 60 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13
Q-CR-22	cm 80 x 80 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13
Q-CR-23	cm 100 x 80 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13
Q-CR-24	cm 120 x 80 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13
Q-CR-25	cm 140 x 80 h	EQ PB MM 3.2	MM 11 / 13

CRISTALLI ANTIX @150kV ORIGINE EXTRA CEE

CODICE	DIMENSIONI	EQUIVALENZA PIOMBO	SPESSORE
Q-CR-01/JP	cm 30 x 24 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)
Q-CR-02/JP	cm 40 x 30 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)
Q-CR-05/JP	cm 50 x 40 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-06/JP	cm 60 x 40 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-10/JP	cm 60 x 50 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)
Q-CR-12/JP	cm 100 x 50 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-13/JP	cm 80 x 60 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-14/JP	cm 100 x 60 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-15/JP	cm 80 x 80 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-16/JP	cm 100 x 80 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-17/JP	cm 120 x 80 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-18/JP	cm 140 x 80 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-101/JP	cm 200 x 100 h	EQ PB MM 2.0	MM 9 (+1/-1)5
Q-CR-19/JP	cm 100 x 50 h	EQ PB MM 3.0	MM 14 (+1/-1)
Q-CR-20/JP	cm 80 x 60 h	EQ PB MM 3.0	MM 14(+1/-1)5
Q-CR-21/JP	cm 100 x 60 h	EQ PB MM 3.0	MM 14 (+1/-1)
Q-CR-22/JP	cm 80 x 80 h	EQ PB MM 3.0	MM 14 (+1/-1)5
Q-CR-23/JP	cm 100 x 80 h	EQ PB MM 3.0	MM 14(+1/-1)5
Q-CR-24/JP	cm 120 x 80 h	EQ PB MM 3.0	MM 14(+1/-1)5
Q-CR-25/JP	cm 140 x 80 h	EQ PB MM 3.0	MM 14(+1/-1)5

TELAIO PER VISIVE MURALI

Telaio / cassonetto reggi cristallo realizzato in estruso di alluminio argento, completo di cornici piombate e contro cornici di finitura. Disponibili in qualsiasi misura.



DESCRIZIONE

Telaio / Cassonetto in estruso di alluminio

SEGNALATORI RX – MOD. LED



Segnalatori luminosi di "PERICOLO RADIAZIONI" e "LASER IN FUNZIONE" a luce bianca / rossa.

Luce bianca per evidenziare le indicazioni del segnalatore;

Luce rossa intermittente per segnalare

l'apparecchio in funzione.

CODICE	DESCRIZIONE
V-PX-10	Segnalatore a parete LASER IN FUNZIONE
V-PX-11	Segnalatore a bandiera LASER IN FUNZIONE
V-PX-12	Segnalatore a parete PERICOLO RADIAZIONI
V-PX-13	Segnalatore a bandiera PERICOLO RADIAZIONI

PANNELLI MURALI ANTIX

Prodotti in doppio truciolare di legno atossico con interposta lamina di piombo titolo 99,9%, calibrata e spazzolata.

Rivestimento in laminato plastico bianco; altri colori a richiesta.

Ancoraggio a parete mediante profili auto-portanti in alluminio anodizzato che evitano forature al pannello.

Battiscopa in pvc autoestinguento, o in alluminio


Dim. pannelli cm 50 x 220 h



DESCRIZIONE
Pannelli con Pb mm 0
Pannelli con Pb mm 1
Pannelli con Pb mm 1,5
Pannelli con Pb mm 2
Pannelli con Pb mm 2,5
Pannelli con Pb mm 3

PANNELLI ANTIX GREZZI PER SOFFITTI E PARETI

Prodotti in doppio truciolare di legno atossico con interposta lamina di piombo titolo 99,9%, calibrata e spazzolata. Completi di materiale di fissaggio e corredati, se necessario, di ulteriore pannello in cartongesso idoneo per livellare la parete e predisporla per il rivestimento in pvc o linoleum (escluso). E' esclusa dalla fornitura la stuccatura e la rasatura dei giunti.

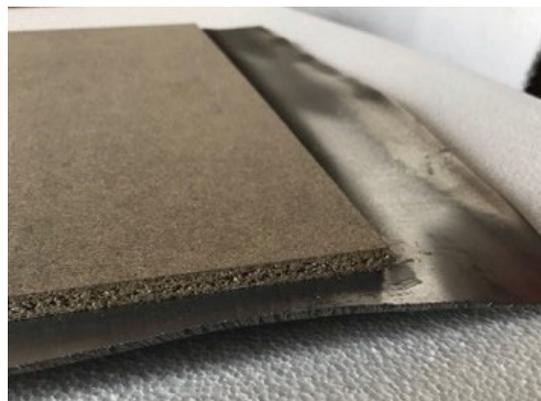

DESCRIZIONE
Pannelli con Pb mm 0
Pannelli con Pb mm 1
Pannelli con Pb mm 1,5
Pannelli con Pb mm 2
Pannelli con Pb mm 2,5
Pannelli con Pb mm 3

CABINATI ANTIX

Per zona di comando o tramezzature .

Realizzati con struttura portante in tamburato di legno duro con interposta lamina di piombo di 1° fusione, titolo 99,9%, calibrata e spazzolata (spess. totale del modulo cm 5).

Rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati, (colore bianco); altri colori a richiesta.

Completi di materiale di fissaggio e coprifili di finitura in alluminio.

Predisposti per l'inserimento di porte antix a battenti, scorrevoli e visive antix di qualsiasi formato.

Dim. pannelli cm 50 x 220 h



DESCRIZIONE
Cabinato con Pb mm 0
Cabinato con Pb mm 1
Cabinato con Pb mm 1,5
Cabinato con Pb mm 2
Cabinato con Pb mm 3
Cabinato con Pb mm 4
MONTANTI PAVIMENTO / SOFFITTO CON BLOCCO REGOLABILE
TIRANTE PARETE / CABINATO

PORTE ANTIX A BATTENTE



Anta costruita in tamburato di legno duro, con interposta lamina di piombo di prima fusione, titolo 99,9%, calibrata e spazzolata.

Rivestimento in laminato plastico bianco; disponibili altre colorazione / effetti.

Bordature perimetrali rivestite con profili in estruso di alluminio.

Stipiti portanti e coprifili realizzati in estruso di alluminio color argento, piombati in modo da garantire continuità di schermatura.

Larghezza standard degli stipiti cm. 16 con possibilità di ampliamento secondo lo spessore del muro. Il tutto corredato da maniglia, serratura con cilindro yale, robuste cerniere.

DESCRIZIONE
Con schermatura Pb mm 0
Con schermatura Pb mm 1
Con schermatura Pb mm 2
Con schermatura Pb mm 3

***** ALTRE PIOMBATURE A RICHIESTA *****

PORTE SCORREVOLI ANTIX ESTERNO MURO

Costruite in tamburato di legno con interposta lamina di piombo, titolo 99,9%, calibrata e spazzolata.

Rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati, colore a scelta.

Binario superiore con monorotaia in estruso di alluminio rettificato, completo di carrelli in materiale di sintesi, montati su giunto elastico.

Portata carrelli fino a 300 Kg. Il tutto corredato da guida inferiore antisbandamento, profili a U in alluminio per la protezione laterale dell'anta, maniglie e mantovana di copertura binario.



DESCRIZIONE
Con schermatura Pb mm 0
Con schermatura Pb mm 1
Con schermatura Pb mm 2
Con schermatura Pb mm 3


***** ALTRE PIOMBATURE A RICHIESTA *****

IMBOTTI PER PORTE SCORREVOLI

Imbotti in estruso di alluminio idonei per rivestimento e schermatura del vano murale con e senza lastra di piombo interna.

DESCRIZIONE
Con schermatura Pb mm 0
Con schermatura Pb mm 1
Con schermatura Pb mm 2
Con schermatura Pb mm 3

AUTOMATISMO PER PORTE SCORREVOLI

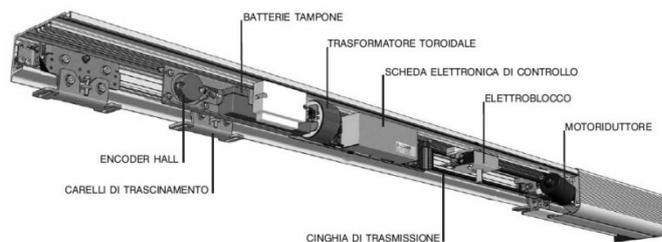

Modulo di comando per automatismi modello BASE per porte a singola anta scorrevole. Completo di centrale elettronica a microprocessore, trasformatore, motoriduttore, encoder,

1 coppia carrelli, testate chiusura automazione, cablaggio, cinghia di trasmissione.


Tensione nominale di alimentazione 230 V - Frequenza nominale 50 Hz - Potenza nominale 180 W - Velocità di apertura automatismo 70 cm/sec - Portata max ammissibile automatismo 1 anta 160 Kg Peso dell'automatismo per metro lineare 9,3 Kg/m Dimensioni dell'automatismo 126hx192mm

Modulo di comando per automatismi modello PLUS per porte a singola anta scorrevole. Completo di centrale elettronica a microprocessore, trasformatore, motoriduttore, encoder,

4 carrelli, testate chiusura automazione, cablaggio, cinghia di trasmissione.

Tensione nominale di alimentazione 230 V - Frequenza nominale 50 Hz - Potenza nominale 180 W - Velocità di apertura automatismo 40 cm/sec - Portata max ammissibile automatismo 1 anta 300 Kg Peso dell'automatismo per metro lineare 10.5 Kg/m Dimensioni dell'automatismo 126hx192mm

QUOTAZIONE A RICHIESTA

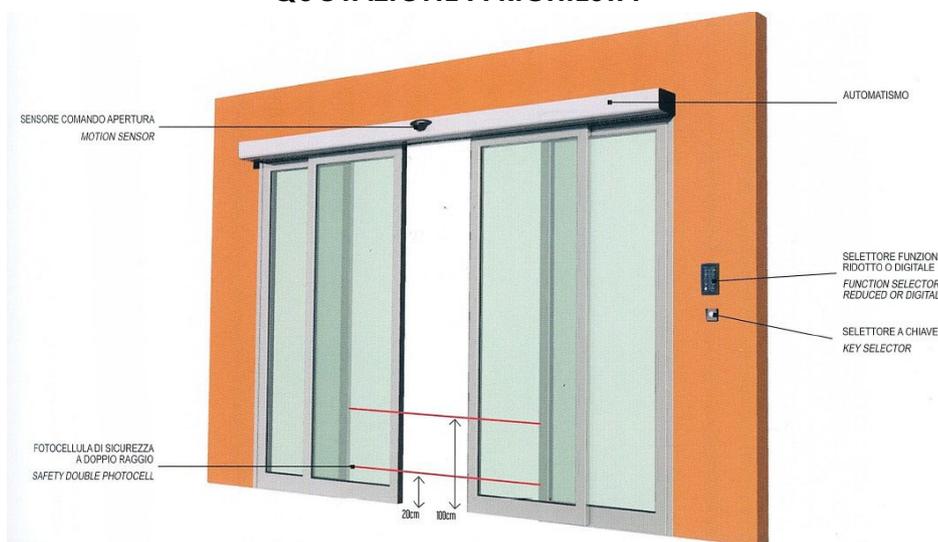

- N. 2 Pulsanti di apertura a gomito in alluminio
- Fococellula di sicurezza a singolo raggio con scheda di controllo integrata nella centrale elettronica dell'automazione
- Sensore infrarosso attivo con separazione segnale di sicurezza da segnale di rilevamento.
- Selettore logiche base. Consente di selezionare 9 differenti modalità di funzionamento della porta e di regolare i parametri di funzionamento base
- Power Kit completo di batterie con scheda di controllo e ricarica

TENDE ANTIX



Utilizzabili per schermatura di porte o finestre.

Realizzati con teli in gomma piombifera.

Rivestimento in nylon colore a scelta tra grigio e blu.

Bordature perimetrali a scelta tra blu e nero

DESCRIZIONE
Tenda Pb mm 0,25
Tenda Pb mm 0,50
Binario per tenda completo di carrelli e staffe di sostegno.
Mantovana di copertura.

SCHERMATURA FINESTRE CON ANTE SCORREVOLI

Ante scorrevoli costruite in tamburato di legno con interposta lamina di piombo, titolo 99,9%, calibrata e spazzolata. Rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati, colore a scelta. Complete di dispositivo di scorrimento a sospensione, carter copri-binario, maniglie ad incasso e mensola anti sbandamento.

DESCRIZIONE
Anta scorrevole con Pb mm 1
Anta scorrevole con Pb mm 2



SCHERMATURA FINESTRE CON ANTE A BATTENTE

Ante a battente costruite in tamburato di legno duro con interposta lamina di piombo, titolo 99,9%, calibrata a spazzolata. Rivestimento in laminato plastico colore a scelta. Complete di stipiti, coprifili e maniglie. Il tutto da installare internamente al vano finestra.

DESCRIZIONE
Anta a battente con Pb mm 1
Anta a battente con Pb mm 2
Anta a battente con Pb mm 3

SCHERMATURE ANTIX PER PAVIMENTI RUSTICI

Schermature effettuate mediante stesura di lastre di piombo di 1° fusione titolo 99,9% calibrata e spazzolata, avvolte in doppio strato di cartonfeltro bitumato per la protezione del piombo.

Fornibili con spessore di piombo a richiesta.

DESCRIZIONE
Cartonfeltro bitumato
Lastre di piombo Pb mm 1
Lastre di piombo Pb mm 1,5
Lastre di piombo Pb mm 2

SCHERMATURE ANTIX PER PAVIMENTI FINITI

Composte da pannelli antix in legno con interposta lamina di piombo di 1° fusione titolo 99,9% calibrata e spazzolata.

Rivestimento con tappeto in pvc antistatico calpestabile e coprifili in acciaio sagomato.

Fornibili con spessore di piombo a richiesta.

DESCRIZIONE
Pannelli con Pb mm 1 e copertura PVC
Pannelli con Pb mm 2 e copertura PVC
Coprifilo perimetrale a scivolo

CABLAS S.R.L. a Socio Unico

Sede Legale: Via Sormani, 34 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Sede Operativa: Via G. Brodolini, 4 – 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039.6049521 – Fax 039.2124938

Sito Web: www.cablas.com

Mail Generale: cablas@cablas.com

Mail Uff. Segreteria: segreteria@cablas.com

Mail Uff. Amministrativo: amministrazione@cablas.com

Mail Uff. Commerciale: commerciale@cablas.com

Mail Uff. Tecnico: tecnico@cablas.com

P.IVA IT 11903230156 – Cod. Fiscale / Registro Imprese 11903230156

R.E.A. N. 1508241 – Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.